

人工透析装置用 塩素系清浄剤

PURGING Clear.

パージング・クリア

THEME

●パージング・クリアのテーマ●

次亜塩素酸Naを基剤として、溶液の安定性を重視しました。
部材へのダメージ軽減を、さらに向上させました。

CONCEPT

●パージング・クリアのコンセプト●

透析液清浄化をサポートする清浄剤



株式会社フェニックス

〒448-0025 愛知県刈谷市幸町2-4-10
TEL 0566-24-0134 FAX0566-24-7098

人工透析装置用 塩素系清浄剤

PURGING・Clear

パージング・クリア

使用方法

- 長時間封入の場合：末端希釈倍率を150～250倍（有効塩素濃度 約500～300ppm/1時間以上接触）
- シングルパスの場合：末端希釈倍率70～150倍（有効塩素濃度 約1,000～500ppm/30分以上接触）
- 水洗時間：60分以上（試薬などで総残留塩素のないことを確認して、更に安全のため30分以上の水洗を行ってください）

※状況に応じて希釈倍率を設定してください。また、適時 炭酸カルシウムの除去洗浄を実施してください。


※希釈倍率および有効塩素濃度は、製造時の濃度を参考に記載しています。保管環境を整えて、可能な限りお早めにご使用ください。

部材への影響性を、さらに軽減させました

【試験方法】


以下の部材を検体として、パージング・クリア（約70倍希釈/有効塩素濃度1,000ppm）・次亜塩素酸Na（有効塩素濃度1,000ppm）に調整し、40℃の環境で連続2週間接触（1週目で溶液の更新）させた後に、重量変化率（%）を確認した。

対象部材/溶液	PURGING・Clear	次亜塩素酸Na
フッ素ゴム	0.02%	0.16%
シリコン	0.75%	1.33%
PE	0.01%	0.02%
ABS	0.13%	0.59%
POM	0.22%	3.05%

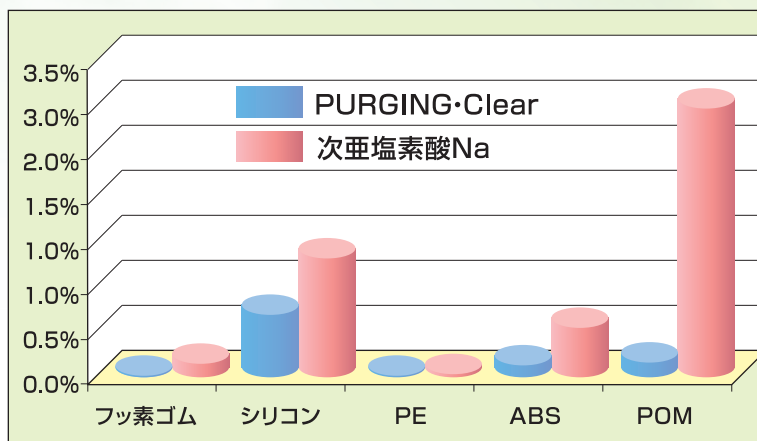

【試験方法】

SUS304 ダメージテストピース（中央部打ち抜き片）を、#240のサンドペーパーで研磨したものを検体として、パージング・クリア（約70倍希釈/有効塩素濃度1,000ppm）・次亜塩素酸Na（有効塩素濃度1,000ppm）に調整し、40℃の環境下で連続2週間浸漬させて表面観察を行った。

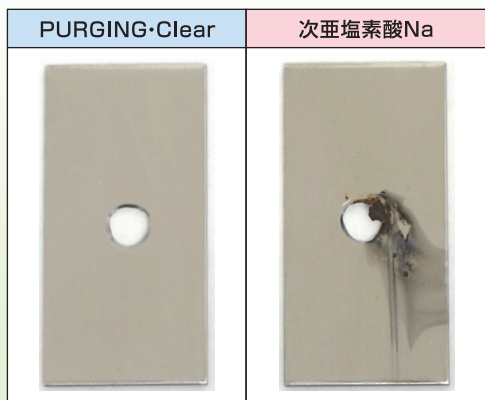

◆ 組 成 ◆

- 次亜塩素酸Na（製造時7%以上）
- 洗浄強化剤（アルカリ助剤）
- 金属封鎖剤 ●腐食抑制剤 ●安定化剤 ●水
- 液性：アルカリ性 / pH 原液 13.0以上
- 液色：淡黄色

◆ 製品情報 ◆

- 【容量・包装】9L（バロンボックス容器）×2本/ケース
- 【使用期限】未開封・冷暗所保管にて、製造より1年間
- 【JANコード】4582553920111

【使用上の注意】

【安全対策】●使用時はゴム手袋と保護メガネ・マスク等の保護具を着用し、眼や皮膚に触れないようにしてください。●タンクでの作製量は1週間以内に使用できる程度の量としてください。また、原液が接触・送液される箇所は、耐性を持つ部材に変更してください。●ステンレス以外の金属（鉄・真鍮など）には不向きです。また、樹脂・ゴムなどには変化をきたすことがありますので予め確認してください。●本剤は目的以外の用途に使用しないでください。●原液がこぼれた箇所は、変色や腐食などの恐れがありますので直ちに拭き取ってください。●容器から取り出した溶液は、元の容器に戻さないでください。

【応急処置】●目に入った場合は、こすらずに直ちに流水下で水洗し、コンタクトレンズが容易に外せる場合は外して水洗して医師の処置を受ける。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流す。異常を感じるならば医師の処置を受ける。●飲み込んだ場合は、無理に吐かせないで、口の中を水で洗い、直ちに医師の処置を受ける。本剤は飲食できません。●塩素ガスを吸入した場合は直ちに、新鮮な空気のある場所に移し、異常を感じるならば医師の処置を受ける。

【保管上の注意】●使用期限は未開封における表示です。できるだけ早くご使用ください。●キャップ面を上にして、キャップを閉め、直射日光を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。高温下では、容器の膨張及び破裂の恐れがあります。（0℃以下は避ける）●製品の有効塩素濃度は、冷暗所、未開封で6%以上を保証値としております。●必要に応じて換気をしてください。

【廃棄への注意】●本品は、次亜塩素酸ナトリウム配合のアルカリ性剤です。排出の際は中和したものを大量の水とともに希釈して排出してください。●使用期限を過ぎた製品は、地区条例に基づき適切に廃棄してください。

【混合禁忌】●本剤は塩素系薬剤のため、酸性の薬品や還元剤と混合すると有毒な塩素ガスを発生させるため混合しないでください。

●製品におけるお問合わせ先



株式会社フェニックス

〒448-0025 愛知県刈谷市幸町2-4-10
TEL0566-24-0134 FAX0566-24-7098

商品デザインおよびパッケージなどは
予告なく変更することがあります。
ご了承ください。
2022/01